


www.euroausili.it

Wave

Una linea di sistemi antidecubito con i benefici della tecnologia digitale. *An antidecubitus system line, with the benefits of the digital technology.*

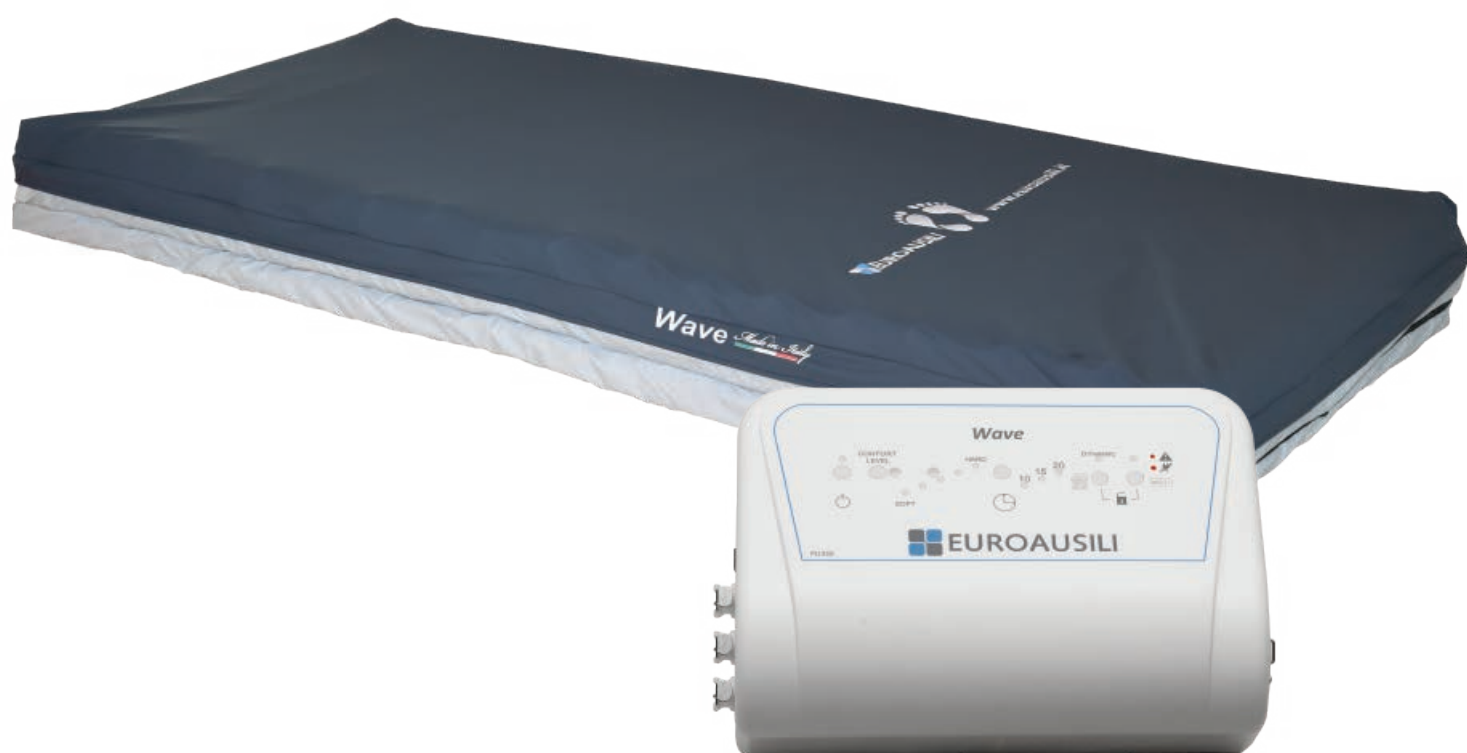

EUROAUSILI

SISTEMI E ACCESSORI ANTIDECUBITO
ANTIDECUBITUS SYSTEMS AND ACCESSORIES

Wave - Wave Plus

La linea Wave rappresenta una soluzione facile per la terapia delle lesioni da decubito disponibile nella versione a 2 o 3 vie* per pazienti a medio e alto rischio. Grazie alla sua versatilità si adatta sia all'ambito ospedaliero che a quello domiciliare.

The Wave line is a very easy solution for the therapy of pressure sores. Available in two or three air outputs, for patients at medium and high risk. Extremely flexible, can easily be adapted to both hospital or home needs.

Alternanza a 2 vie (2 way) (*)



Alternanza a 3 vie (3 way) (*)



Wave



Cover



- Tessuto bielastico
- Impermeabile ai liquidi
- Traspirante al vapore

- Bistretch fabric
- Waterproof to liquid
- Breathable to vapor

Caratteristiche tecniche

- Medio-alto rischio.
- Altezza: 16 cm
- Portata funzionale kg: 200
- Base di sicurezza in poliuretano espanso.
- CPR in corrispondenza della testa del paziente.

Technical features

- Medium-high risk.
- Height: 16 cm
- Max supported weight: 200 kg
- Polyurethane foam safety base.
- CPR Cardio Pulmonary Resuscitation function located at the head of the patient.

Wave Plus



Caratteristiche tecniche

- Alto rischio.
- Altezza: 18 cm
- Portata funzionale kg: 230
- 7 celle escludibili per un ottimale e completo scarico delle pressioni.
- CPR in corrispondenza della testa del paziente.

Technical features

- *High risk.*
- *Height: 18 cm*
- *Max supported weight: 230 kg*
- *The heel zone (7 elements) can be excluded, in order to obtain a zero-pressure zone.*
- *CPR Cardio Pulmonary Resuscitation function located at the head of the patient.*

Compressore - Compressor




- Pannello di controllo con comando soft-keys.
- Regolazione del comfort su 5 livelli.
- Blocco tasti per evitare modifiche alle impostazioni garantendo una sicurezza ottimale al sistema.
- Allarme visivo ed acustico silenziabile.
- Durata del ciclo di alternanza variabile (10-15-20 minuti).
- Funzionalità in modalità statica e dinamica.
- Possibilità di gonfiaggio massimo per le funzioni di nursing.
- Sensore di inclinazione per un incremento efficace delle pressioni per evitare lo sprofondamento in zona sacrale.

- *Soft-keys control panel.*
- *Adjustable comfort within 5 pressure levels.*
- *Automatic key locking ensuring improved safety.*
- *Acoustic/visual alarm system with silencer that trips in case of low mattress pressure.*
- *Cycle time can be set (10-15-20 minutes).*
- *Functionalities: static and dynamic mode.*
- *Maximum inflation for nursing operations.*
- *Inclination sensor for an efficient increasing of the pressures, so as to avoid sacral sinking*

Euro Ausili si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche tecniche o commerciali ritenute utili, pertanto i dati e le informazioni riportate possono subire modifiche e/o aggiornamenti.
Euro Ausili is free to make any useful technical and commercial changes that are believed to be necessary at any time and without notice.



Made in Italy

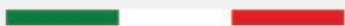

La produzione è interamente italiana con macchinari all'avanguardia in grado di rispondere alle esigenze dei clienti in tempi rapidi con un elevato standard qualitativo.

The production is entirely Italian with advanced machinery capable of responding to customer needs quickly and with a high quality standard.

CE



EUROAUSILI S.r.l.

Stabilimento e Show Room:
Via R. Cuttica, 43/45
20025 Legnano (MI) - Italy

tel. +39.0331.542850/0331.440931
fax +39.0331.547929

Stabilimento:
Via Genova, 21
20020 Villa Cortese (MI) - Italy

web: www.euroausili.it
email: info@euroausili.it



Management
System
ISO 9001:2015
EN ISO 13485:2016



www.tuv.com
ID 918625193

www.euroausili.it