

Hybrid

Il primo materasso antidecubito a zone differenziate con compensazione pressoria automatica. *The first antidecubitus mattress with different sectors, working with an automatic pressure compensation system.*




EUROAUSILI

SISTEMI E ACCESSORI ANTIDECUBITO
ANTIDECUBITUS SYSTEMS AND ACCESSORIES

Hybrid

Hybrid è un materasso antidecubito estremamente confortevole che unisce i vantaggi del poliuretano espanso alla funzione della bassa pressione continua creando così punti di contatto sempre diversi fra la cute del paziente e la superficie.

Hybrid is a very comfortable antidecubitus mattress able to always guarantee low contact pressures between the patient skin and the mattress' surface by the simultaneous action of the Polyurethane foam elements and of the air displacement.

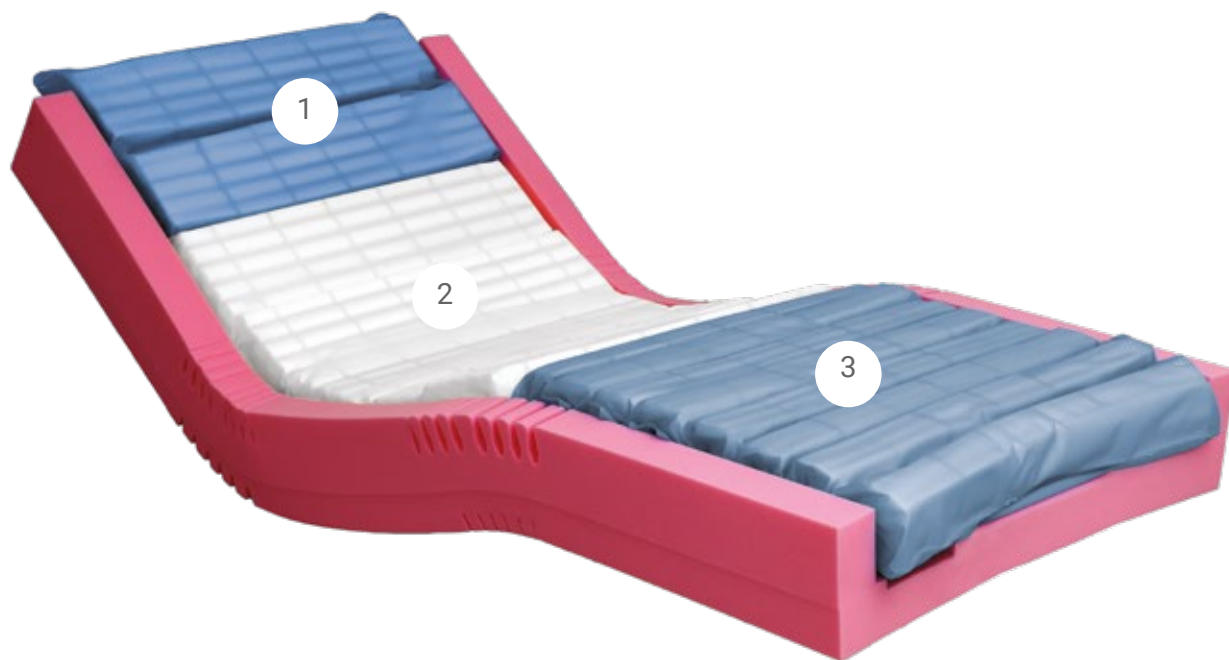

Cover



- Tessuto bielastico
- Impermeabile ai liquidi
- Traspirante al vapore
- Fodera antibatterica e antimicotica
- Bistretch fabric
- Waterproof to liquid
- Breathable to vapor
- Antibacterial and antimycotic cover

Hybrid è composto da uno scafo di contenimento realizzato in poliuretano espanso e da 15 elementi interni suddivisi in 3 specifiche aree:

- **Area 1:** 2 elementi più soffici per un comfort ideale sulla testa del paziente.
- **Area 2:** 5 elementi a rigidità maggiore per un sostegno ideale della zona lombare e sacrale.
- **Area 3:** 8 elementi con sezione ridotta per lo scarico ottimale delle pressioni sulla parte delle gambe e dei talloni.

Grazie alla particolare struttura ed all'alta resilienza, il sistema Hybrid, offre il vantaggio di intercambiare i benefici del materasso attivo a celle d'aria ad alta efficacia terapeutica con quelli del materasso passivo se utilizzato senza compressore.

Hybrid is made of a Polyurethane foam case containing 15 different elements divided in 3 sectors:


- **Sector 1:** 2 softer elements for an ideal comfort of the patient's head.
- **Sector 2:** 5 higher density elements for optimal support of the sacral and lumbar zone.
- **Sector 3:** 8 elements with a reduced thickness to allow the best pressure discharge of the lower limbs and heels.

Thanks to its particular structure and height resilience, the Hybrid system offers the advantage of interchanging the benefits of an highly therapeutic active air cell mattress with those of a passive mattress if used without a compressor.



MODALITÀ ATTIVA - POWERED MODE

Alternanza a 2 vie (2 way)

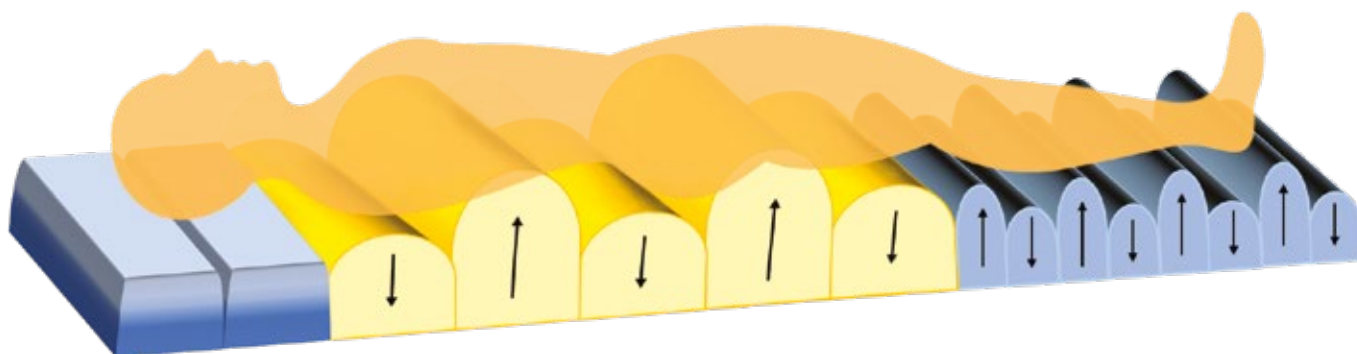

Compressore opzionale *Compressor option*



Caratteristiche tecniche

- Pannello di controllo con comando soft-keys
- Modalità statica o dinamica
- Regolazione del comfort su 5 livelli
- Blocco tasti per evitare modifiche alle impostazioni garantendo una sicurezza ottimale del sistema
- Allarmi visivi ed acustici silenziabili
- Durata del ciclo di alternanza variabile (10-15-20 minuti)
- Funzione nursing

Technical features

- Soft-keys control panel
- Static or dynamic mode
- Adjustable comfort within 5 pressure levels
- Automatic keyboard locking to ensure safety and to avoid unwanted setup changes
- Visual and acoustic alarm, provided with silencer
- Time cycle: 10-15-20 minutes
- Nursing function

I sistemi della linea Hybrid sono omologati in classe 1IM

Component materials are certified by the manufacturer as fire resistant. Hybrid systems are homologated as class 1IM.

Euro Ausili si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche tecniche o commerciali ritenute utili, pertanto i dati e le informazioni riportate possono subire modifiche e/o aggiornamenti. Euro Ausili is free to make any useful technical and commercial changes that are believed to be necessary at any time and without notice.



Made in Italy

La produzione è interamente italiana con macchinari all'avanguardia in grado di rispondere alle esigenze dei clienti in tempi rapidi con un elevato standard qualitativo.

The production is completely Italian. Our products are manufactured with high tech machinery, in order to quickly satisfy the customers' needs at high quality standard.



Management System
ISO 9001:2015
EN ISO 13485:2016



www.tuv.com
ID 9105025193



EUROAUSILI S.r.l.

Stabilimento e Show Room:
Via R. Cuttica, 43/45
20025 Legnano (MI) - Italy

tel. +39.0331.542850/0331.440931
fax +39.0331.547929

Stabilimento:
Via Genova, 21
20020 Villa Cortese (MI) - Italy

web: www.euroausili.it
email: info@euroausili.it

rev.0/2022

www.euroausili.it